

## 検査内容変更のお知らせ

---

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

この度、別掲の検査項目につきまして、検査方法・基準値等を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

### 変更内容

---

- 別掲の一覧表をご参照下さい。

### 変更期日

---

- 平成 24 年 12 月 5 日(水) 午後受付分より

## 検査内容変更項目一覧

項目コード	検査項目	変更箇所	新	旧	備考 (検査案内掲載頁)
471	NCC-ST439	基準値	女性 49歳以下 7.0未満 50歳以上 4.5未満 男性 4.5未満	7.0以下	基準値の見直しによる再設定  P.49
		単位	U/ml	U/ml	
1687	抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA) (C-ANCA)	検査方法	CLEIA	ELISA	ANCAに対し特異性の高い検査方法への変更  P.72
		基準値	3.5未満	10未満	
		単位	U/ml	EU	
		備考欄	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。	なし	
1688	抗好中球細胞質抗体 (MPO-ANCA) (P-ANCA)	検査方法	CLEIA	ELISA	ANCAに対し特異性の高い検査方法への変更  P.72
		基準値	3.5未満	20未満	
		単位	U/ml	EU	
		備考欄	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。	なし	
3239	血中脂肪酸4分画	所要日数	5~7日	8~11日	所要日数の短縮  基準値見直しによる再設定
		基準値	ジホモ-γ-リノレン酸 22.6~72.5 μg/ml アラキドン酸 135.7~335.3 μg/ml エイコサペンタエン酸 10.2~142.3 μg/ml ドコサヘキサエン酸 54.8~240.3 μg/ml EPA/AA比 0.05~0.61	ジホモ-γ-リノレン酸 10.9~43.5 μg/ml アラキドン酸 85.1~207.8 μg/ml エイコサペンタエン酸 11.6~107.2 μg/ml ドコサヘキサエン酸 48.6~152.4 μg/ml EPA/AA比 0.09~0.75	

## 新旧二法の相関 (相関図の報告下限値未満のデータは実測値を用いております。)

抗好中球細胞質抗体(PR3-ANCA) (C-ANCA) n=106

		旧試薬		計
		陽性 (10EU 以上)	陰性 (10EU 未満)	
新試薬	陽性 (3.5U/ml 以上)	84	0	84
	陰性 (3.5U/ml 未満)	6	16	22
計		90	16	106


一致率:94.3%

抗好中球細胞質抗体(MPO-ANCA) (P-ANCA) n=122


		旧試薬		計
		陽性 (20EU 以上)	陰性 (20EU 未満)	
新試薬	陽性 (3.5U/ml 以上)	100	3	103
	陰性 (3.5U/ml 未満)	7	12	19
計		107	15	122

一致率:91.8%

抗好中球細胞質抗体(PR3-ANCA) (C-ANCA)

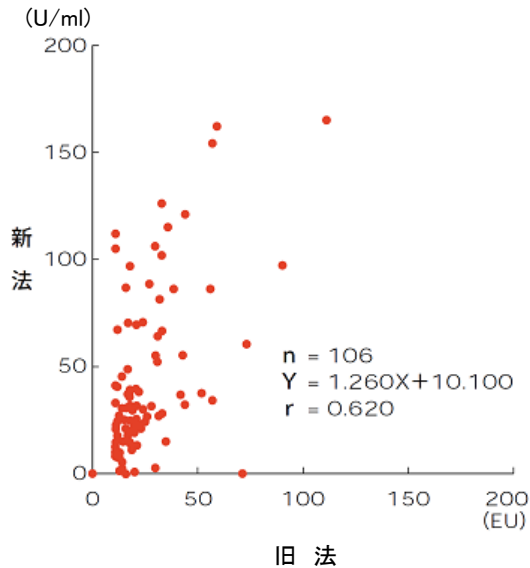

抗好中球細胞質抗体(MPO-ANCA) (P-ANCA)

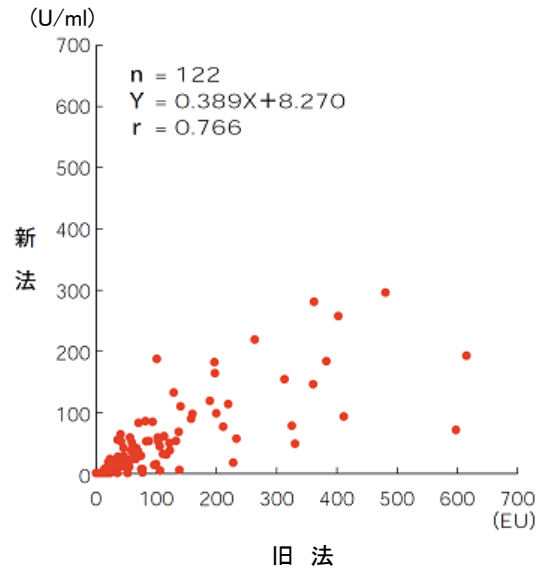

### □新検査方法参考文献

松下 雅和, 他: 医学と薬学 66(5): 823~828, 2011.(抗好中球細胞質抗体 2項目共通)